

Baxter

Hillrom
P290

AIR MATTRESS

MATERAC P290

Zapewnienie bezpiecznego środowiska
dla skóry pacjentów



Odleżyny są kosztowne i powszechne. Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy nakładkę terapeutyczną/ materac terapeutyczny P290 jako pomoc w zapobieganiu i leczeniu odleżyn u dorosłych pacjentów z grupy od niskiego do wysokiego ryzyka. Materac P290 zapewnia regulację poziomu zanurzenia oraz możliwość korzystania z terapii w trybie ciągłego lub zmiennego niskiego ciśnienia.

Stosowanie terapii tego typu powoduje zmniejszenie nacisku na wrażliwe tkanki i jest zgodne z międzynarodowymi wytycznymi NPUAP/EPUAP/PPPIA zalecającymi zmianę materaca prewencyjnego na materac terapeutyczny (np. materac powietrzny z trybem zmiennego ciśnienia, materac niskociśnieniowy lub łóżko fluidalne), gdy pacjent¹:

- Nie może być pozycjonowany w sposób zmniejszający ucisk na zagrożony obszar skóry
- Ma odleżyny na dwóch lub więcej częściach ciała, które ograniczają zmianę pozycji
- Ma odleżyny nie poddające się leczeniu lub ich stan się pogarsza pomimo odpowiedniej, kompleksowej opieki
- Jest bardzo narażony na wystąpienie dodatkowego ryzyka powstania odleżyn
- Przeszedł operację przeszczepu skóry
- Czuje się niekomfortowo
- Leżąc na bieżącym materacu styka się z płytą leża łóżka

MATERAC P290

Materac terapeutyczny / terapeutyczna nakładka na materac

FUNKCJE I KORZYŚCI

Produkt opracowano z myślą o kompleksowym zapobieganiu odleżynom i ich leczeniu u pacjentów z grupy ryzyka lub u których występują odleżyny

Możliwość doboru trybu terapii z ciągłym lub zmiennym niskim ciśnieniem w zależności od potrzeb pacjenta i zaleceń lekarskich

Możliwość regulacji ustawień cykli i twardości materaca, co zapewnia lepszą kontrolę nad poprawnością terapii i wygodą pacjenta

Funkcje zapewniające bezpieczeństwo pacjentów i personelu obejmują m.in. automatyczną blokadę panelu sterowania, wskaźniki informujące o usterkach i tryb transportowy (z możliwością zastosowania na 2 godziny)

Trzy strefy redystrybucji ciśnienia, w tym nachylona pod kątem 5° strefa pięt pracująca w trybie zmiennym

Możliwość korzystania z opcjonalnych funkcji napętniania powietrzem P-MAX i PLUS zapewniających pacjentów i dodatkowe podparcie i bezpieczeństwo podczas zmiany pozycji i przenoszenia

Materac dostępny zarówno w wersji z wkładem powietrznym jak i piankowym


Zintegrowana kieszeń na kasety RTG zwiększająca komfort pacjenta*

Uchwyty transportowe ułatwiające przemieszczenie pacjenta w sytuacji nagłej*


POKROWIEC

Poliuretan pokryty powłoką poliestrową, zamek błyskawiczny 360°, niski współczynnik tarcia, rozciągliwy w dwóch kierunkach, oddychający, bakteriostatyczny, grzybobójczy i przeciwbakteryjny; można go czyścić i prać. Można stosować roztwory czyszczące na bazie chloru (≤1000 ppm).

Pianka

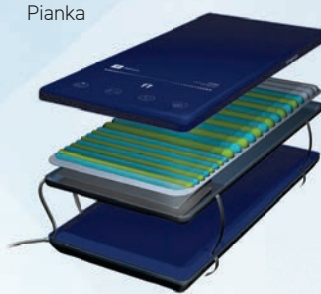

Powietrze

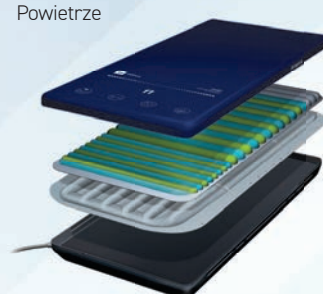

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAKŁADKA POWIETRZNA NA MATERAC

Długość	2000 mm
Szerokość	900 mm
Wysokość	100 mm
Waga	6,1 kg

MATERAC ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM PIANKOWYM

Długość	2000 mm
Szerokość	900 mm
Wysokość	170 mm
Waga	12 kg

MATERAC ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM POWIETRZNYM

Długość	2000 mm
Szerokość	900 mm
Wysokość	170 mm
Waga	7,5 kg

JEDNOSTKA KONTROLNA

Długość	900 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	120 mm
Waga	2,2 kg

Bezpieczne obciążenie robocze

250 kg

Zalecana masa ciała

30 do 140 kg

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług, proszę skontaktować się z miejscowym przedstawicielem firmy Baxter lub odwiedzić naszą stronę internetową.

baxter.com.pl

* opcja

¹ EPUAP/NPIAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2019.

Materac P290 pomaga w zapobieganiu i leczeniu odleżyn u dorosłych pacjentów niskiego i wysokiego ryzyka, w zalecanych granicach wagi pacjenta od 30 do 140 kg, w celu osiągnięcia potwierdzonej skuteczności klinicznej we wszystkich typowych pozycjach wezgłowia łóżka. Klasa IIa

Jednostka notyfikowana: GMED CE0459. Producent: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner Francja

Niniejsze wyrob medyczny jest produktem podlegającym regulacjom prawnym, który zgodnie z takimi regulacjami posiada oznaczenie CE. Firma Baxter zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania znajdującymi się w dokumentach dołączonych do wyrobów medycznych. Personel placówek ochrony zdrowotnej jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację przedstawionych wyrobów medycznych. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach wyrobów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Baxter, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy wyrobów.

Data zatwierdzenia materiału: 07.2023 – PL-CS151-230001. Baxter, Hillrom to znaki towarowe firmy Baxter International Inc.