


Materac NP100 Bidensity firmy Hill-Rom

Skuteczne i bezpieczne zapobieganie powstawaniu odleżyn

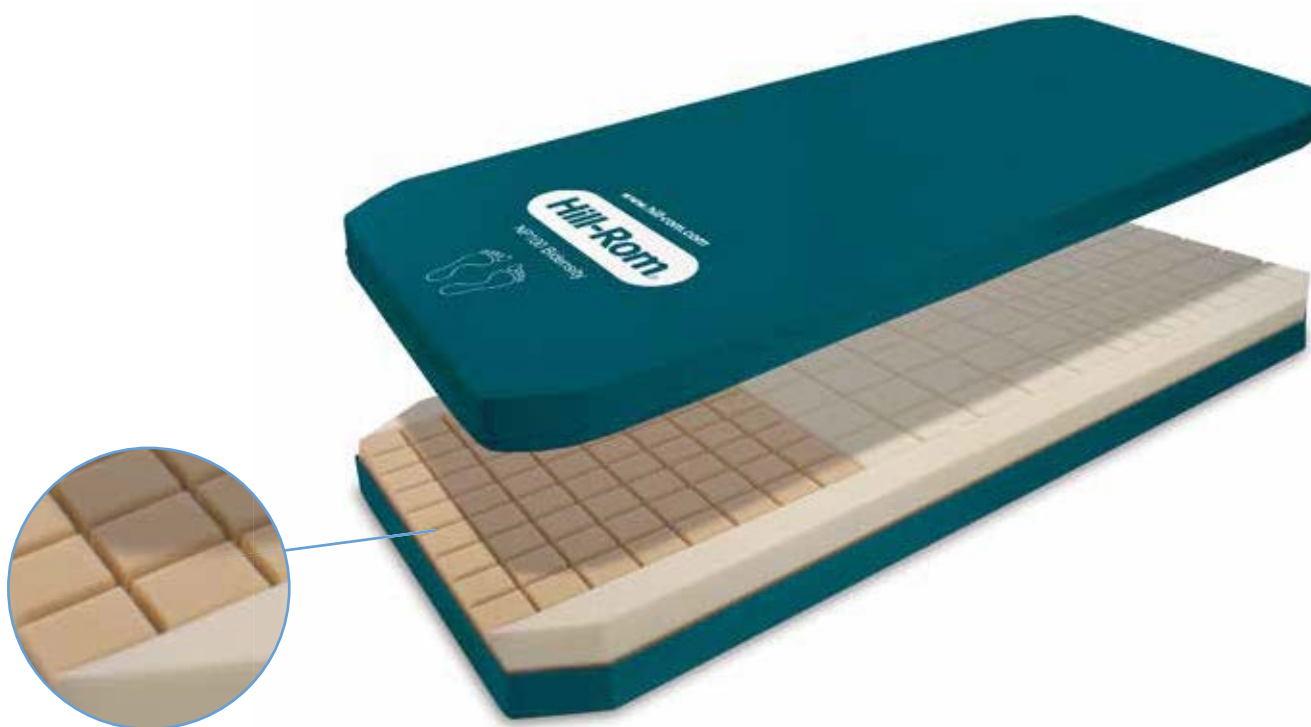

Właściwości i zalety produktu

- Pianka przycięta w kostki umożliwia indywidualne dopasowanie się do kształtu ciała pacjenta oraz redukcję ucisku i tarcia
- Układające się niezależnie od siebie kostki zwiększają przepływ powietrza, przeciwdziałając gromadzeniu się wilgoci, co z kolei pozwala zmniejszyć macerację i ścieranie naskórka
- Strefa pięt wykonana z pianki o niskiej gęstości zapewnia miękkie podparcie pięt i kostek
- Materac umożliwia łatwe czyszczenie i utrzymywanie higieny
- Boki wykonane z pianki o wysokiej gęstości, zaprojektowane, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i ułatwić im schodzenie z materaca
- Dopasowuje się do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka
- Posiada pokrowiec ze zgrzewanymi krawędziami zaopatrzone w uchwyty do przenoszenia

Materac NP100 Bidensity firmy Hill-Rom

Materac z dwóch pianek wysokoelastycznych o różnej gęstości

Dzięki zastosowaniu dwóch pianek o różnej gęstości i przycięciu ich w kostki, które układają się niezależnie od siebie i indywidualnie dopasowują do kształtu ciała pacjenta, materac NP100 Bidensity firmy Hill-Rom umożliwia zmniejszenie nacisku na skórę i tarcia. Pianka przycięta w kostki zwiększa przepływ powietrza na styku powierzchni z ciałem pacjenta, przeciwdziałając gromadzeniu się wilgoci, co z kolei pozwala zmniejszyć macerację i ścieranie naskórka.

Dostępny w korzystnej cenie materac NP100 Bidensity firmy Hill-Rom pomaga przeciwdziałać uszkodzeniom skóry i odleżynom. Dolna część materaca, wykonana z pianki o niskiej gęstości, zapewnia miękkie podparcie pięt i kostek. Materac dopasowuje się do większości ram łóżek i do wszystkich ustawień pozycji łóżka.

Materac wyposażono w wodoszczelny, a jednocześnie przepuszczalny dla pary wodnej, elastyczny, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, który jest łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji. Pozwala to pacjentom i ich opiekunom zapewnić maksymalną dbałość o higienę.

Materac NP100 Bidensity firmy Hill-Rom jest dostępny także w wersji o większej długości

Rozmiar standardowy: 198 cm



+5 cm

Dane techniczne

Materac (dostępne wersje o rozmiarach innych niż standardowy)

Długość	198 lub 203 cm
Szerokość	85 lub 90 cm
Wysokość	14 cm

Gwarancja

Firma Hill-Rom udziela 5-letniej gwarancji na piankę i 2-letniej gwarancji na pokrowiec. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Bezpieczne obciążenie robocze	250 kg
Zalecane obciążenie terapeutyczne	od 30 do 150 kg
Krawędzie	zgrzewane/szyte
Dezynfekcja	Można używać roztworów na bazie chloru. Stężenie nie może przekraczać 1000 ppm (lub 10 000 ppm w przypadku wersji XT).

Firma Hill-Rom jest światowym liderem w dziedzinie technologii medycznych, zatrudniającym ponad 10 000 pracowników na całym świecie. Współdziałając z podmiotami świadczącymi usługi medyczne w zróżnicowanych warunkach opieki w ponad 100 krajach, opracowujemy rozwiązania, które pozwalają uzyskać doskonałe pod względem klinicznym i finansowym rezultaty w następujących pięciu podstawowych obszarach: stopniowe uruchamianie pacjentów, terapia ran i zapobieganie ich powstawaniu, monitorowanie pacjenta i diagnostyka, bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów chirurgicznych oraz zdrowie dróg oddechowych. Mottem naszych pracowników, programów i produktów jest **poprawa wyników leczenia pacjentów oraz warunków pracy personelu medycznego każdego dnia, na całym świecie.**

Niektóre produkty/elementy opcjonalne nie są dostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Dalsze informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Hill-Rom lub na stronie internetowej:

www.hill-rom.com

Powierzchnia materaca Hill-Rom NP100 pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn u pacjentów bez ryzyka lub z umiarkowanym ryzykiem ich powstawania, którzy mają co najmniej 1,46 m wzrostu i których masa ciała mieści się w zakresie od 30 do 150 kg.

Klasa I

Producent: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Francja

To urządzenie medyczne jest produktem medycznym posiadającym oznaczenie CE wskazujące na jego zgodność ze stosownymi dyrektywami. Firma Hill-Rom zaleca dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i właściwego użytkowania sprzętu, dołączonymi do wyrobów medycznych. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie i konserwację tych wyrobów medycznych ponosi personel placówek służby zdrowia. Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy produktów.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Nr dok.: SPL116304-03, 14 sierpnia 2017


ParaMedica
POLSKA

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom