


POWERX2



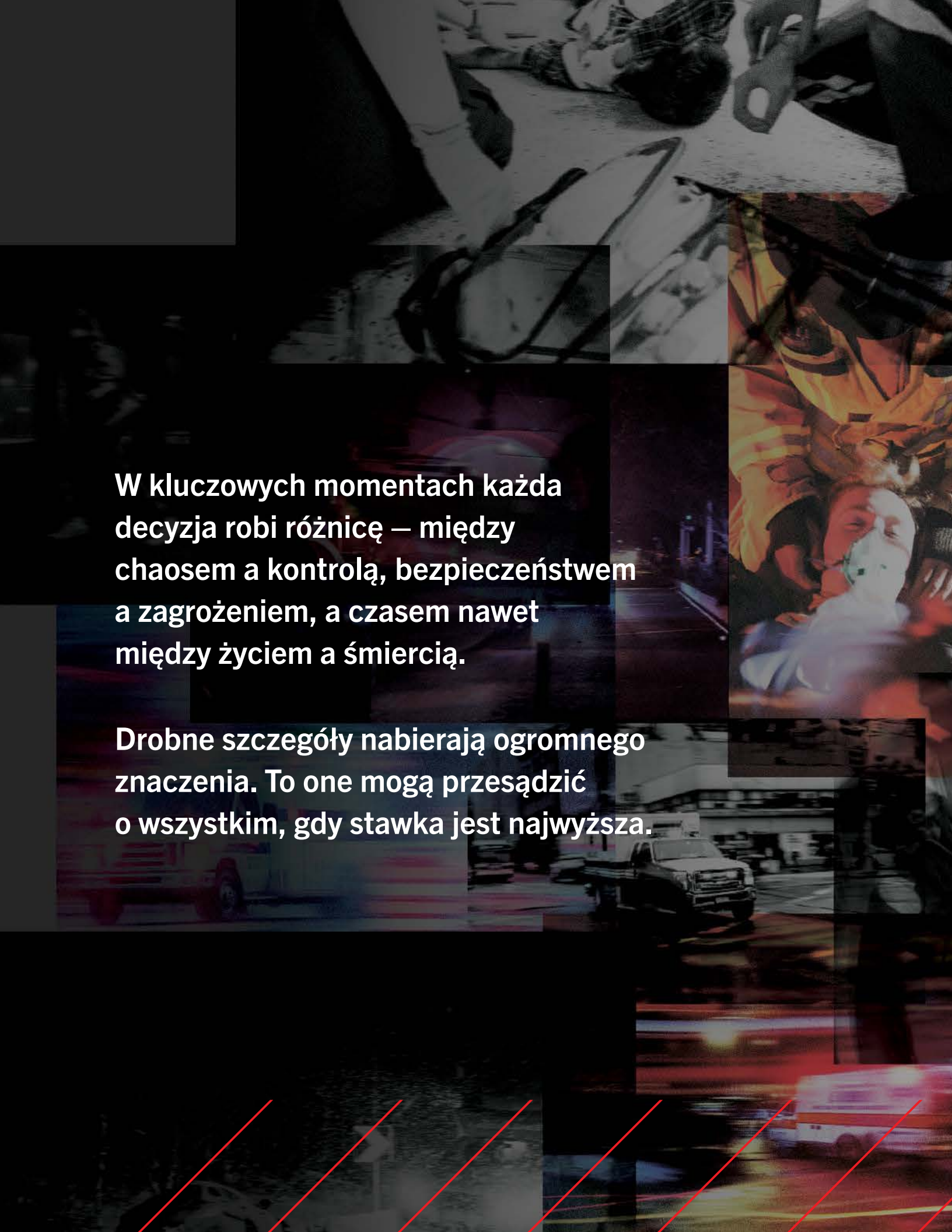

W kluczowych momentach każda decyzja robi różnicę — między chaosem a kontrolą, bezpieczeństwem a zagrożeniem, a czasem nawet między życiem a śmiercią.

Drobne szczegóły nabierają ogromnego znaczenia. To one mogą przesądzić o wszystkim, gdy stawka jest najwyższa.





CROSSLOCK

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z RĘCZNYMI
I ELEKTRYCZNYMI SYSTEMAMI MOCOWANIA



EZGLIDE

O 27% WIĘKSZE KOŁA ORAZ ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT POD
NOSZAMI, POPRAWIA STABILNOŚĆ I ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA



Dzięki priorytetowemu traktowaniu kontroli i niezawodności, całkowicie nowe nasze FERNO POWER X2™ pozwalają obsługującym skupić się na tym, co najważniejsze, czyli zapewnieniu bezpiecznej i skutecznej opieki nad pacjentem.



ENDURACHARGE

AKUMULATOR LiFePO4 36 V

2X DŁUŻSZA TRWAŁOŚĆ NIŻ U KONKURENCJI



SCENE BRIGHT

DWUSTOPNIOWE OŚWIETLENIE 360°



CROSSLICK

W pełni kompatybilna konstrukcja na dziś i na jutro.

Nosze FERNO® POWER X2™ są w pełni kompatybilne z ręcznymi i elektrycznymi systemami mocowania, eliminując bariery finansowe i sprzętowe dla osób poszukujących długoterminowego rozwiązania już dziś.



Nosze FERNO® POWER X2™ są kompatybilne z następującymi systemami i elementami:

- System mocowania noszy FERNO POWER F2™*
- Ręczny mechanizm mocowania noszy FERNO PRO F1*
- Systemy FERNO i Stryker® Antler Rail / systemy mocowania do transportu wielu poszkodowanych
- Ręczny mechanizm mocowania noszy Stryker Performance-LOAD®*
- System załadunku Stryker Power-LOAD®*

ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY ZGODNOŚĆ MOCOWAŃ NOSZY FERNO POWER X2 Z SYSTEMEM FERNO POWER F2, FERNO PRO F1, STRYKER PERFORMANCE-LOAD ORAZ STRYKER POWER-LOAD.



POWERF2™

Prezentujemy całkowicie nowy system mocowania noszy FERNO® POWER F2™ z napędem CrossDrive. To pierwszy system, który zapewnia rzeczywistą kompatybilność w zakresie ręcznych i elektrycznych noszy sanitarnych. Zaprojektowany, skonstruowany i wykonany z myślą o podnoszeniu, załadunku i rozładunku pacjentów w najtrudniejszych warunkach za pomocą jednego przycisku, zapewniając personelowi ratunkowemu pełną kontrolę, a jednocześnie zmniejszając ryzyko urazów i pozwalając skupić na tym, co może się wydarzyć.




Nowy standard bezpieczeństwa
ratowników medycznych,
efektywności i łatwości
manewrowania noszami.



2



3

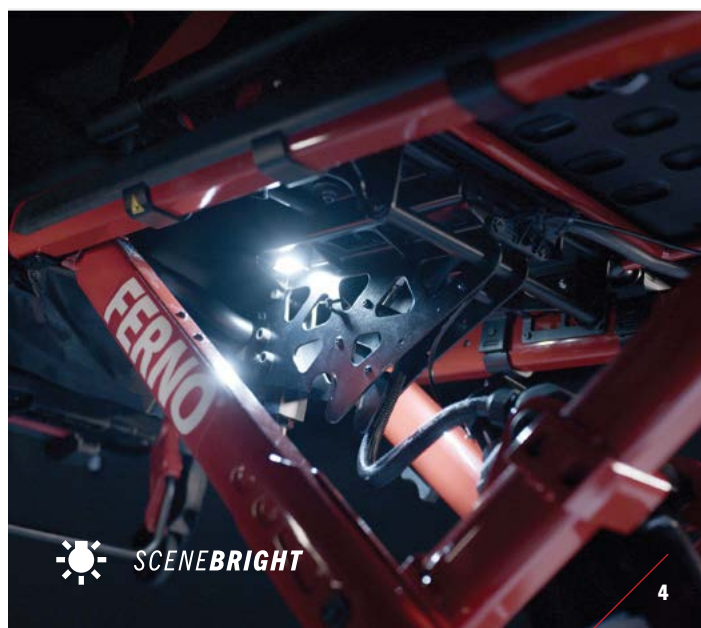

4

- 1 Ulepszone dzięki zastosowaniu naszych największych kół w celu zwiększenia prześwitu pod noszami i zapewnienia doskonałej sprawności
- 2 Blokady kół kierunkowych* dla zapewnienia dodatkowej kontroli w ciasnych przestrzeniach
- 3 Uchwyt do ciągnięcia/pchania* dla zapewnienia optymalnej kontroli i komfortu podczas transportu pacjentów na niższych wysokościach
- 4 Dwustopniowe lampy LED zapewniające oświetlenie we wszystkich kierunkach (360°)
- 5 Większa łatwość manewrowania w ciasnych przestrzeniach dzięki naszej teleskopowej ramie nośnej
- 6 Opcja obsługi ręcznej w przypadku braku zasilania

* WYPOSAŻENIE OPCJONALNE




5



6



Zaprojektowane z myślą
o niezawodności,
trwałości i sprawności.

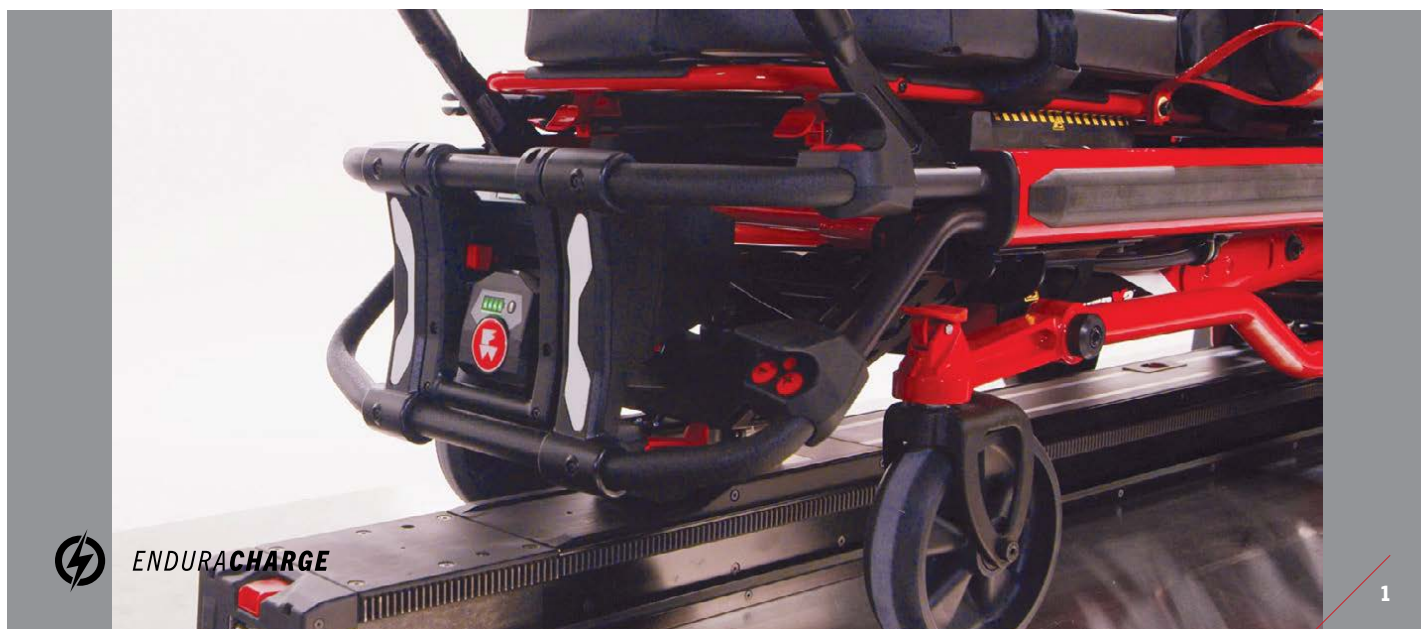

1

- 1 Zintegrowany system ładowania ICS® usprawnia zarządzanie akumulatorem* (dostępny z transporterem POWER F2 i uniwersalnym systemem mocowania noszy Pro F1)
- 2 Na ekranie LCD wyświetlana jest liczba cykli eksploatacyjnych noszy, co ułatwia planowanie serwisu
- 3 Konstrukcja siłownika bez węża dla zapewnienia większej niezawodności i ograniczenia ciężaru
- 4 Testowane w kontrolowanym środowisku, gwarantując ponad 10 lat eksploatacji


* SYSTEM ZAPEWNIĄCY ZGODNOŚĆ MOCOWAŃ NOSZY POWER X2 Z SYSTEMAMI POWER F2 I PRO F1



2



3

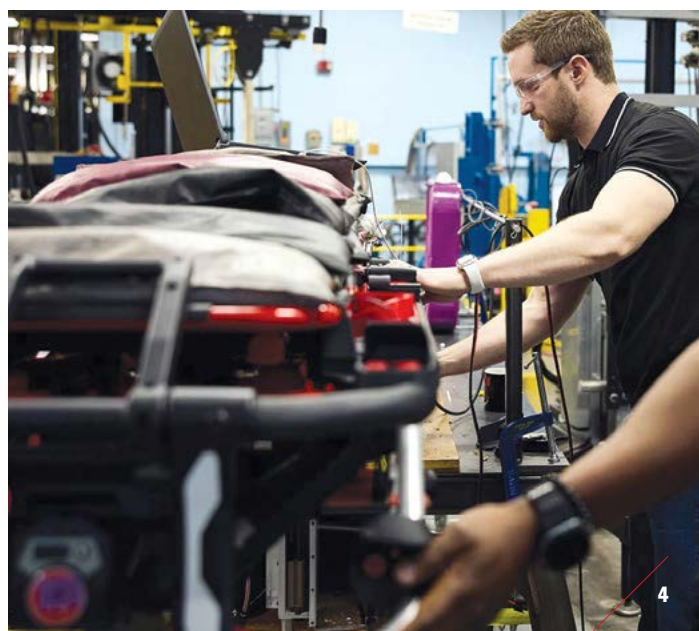

4



Podnosimy jakość opieki
nad pacjentem, komfort
i bezpieczeństwo.



- 1 Podparcie pod kolana* zwiększa przestrzeń między obsługującym od strony nóg pacjenta a jego stopami, zapewniając dodatkowy komfort
- 2 Pozycja przeciwwstrząsowa unosi stopy pacjenta, wspomagając leczenie w stanach wstrząsowych
- 3 Uszczelniony materac z podgłówkiem dla zwiększenia komfortu pacjenta

* WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

SPECYFIKACJA

NR KATALOGOWY
0015816

DŁUGOŚĆ (MAKS.)
202,45 CM

DŁUGOŚĆ (MIN.)
166,3 CM

WAGA*
66 KG

NOŚNOŚĆ
318 KG (BEZ WSPOMAGANIA)
500 KG (W POZYCJI ZŁOŻONEJ)

ZASILANIE
AKUMULATOR LiFePO4 36,3 V

*WAGA BEZ MATERACA I PASÓW MOCUJĄCYCH.

FIRMA FERNO® ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI
BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

AKCESORIA

UCHWYT DO CIĄNIĘCIA/PCHANIA/
PODNOSZENIA
STOJAK NA KROPLÓWKĘ
KIESZEŃ MAGAZYNOWA Z SIATKI STO-NET
UCHWYT PLATFORMY PACRAC
UCHWYT RUROWY
UCHWYT BUTLI TLENOWEJ NA RAMIE NOŚNEJ
UCHWYT BUTLI TLENOWEJ NA OPARCIU
PLECÓW
ZASOBNIK NA AKCESORIA
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY DO TRANSPORTU
DZIECI PEDI MATE® +
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY DO TRANSPORTU
NOWORODKÓW NEO MATE
KANGOOFIX
SYSTEM LBS JR. DO POSZERZENIA RAMY
PACJENTA


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZACZEP NA WYPOSAŻENIE
MATERAC Z PODGŁÓWKIEM
BŁOKADY KÓŁ OD STRONY NÓG
UCHWYT OD STRONY NÓG
OŚWIETLENIE
PASY MOCUJĄCE OZNACZONE KOLORAMI
WYŚWIETLACZ STANU Z LICZNIKIEM CYKLI
AKUMULATOR LiFePO4 36,3 V

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI*

SAE J3027
CAAS-GVS
IP56
KKK-A-1822F
NFPA 1900
IEC 60601-1-2
ISTA 3B
EN 1789

*NOSZE FERNO® POWER X2™ SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA POWYŻSZYCH
NORM, JEŻELI SĄ UŻYWANE Z ZESTAWEM ZAPEWNIĄJĄCYM
ZGODNOŚĆ MOCOWAŃ Z SYSTEMEM PRO F1™.

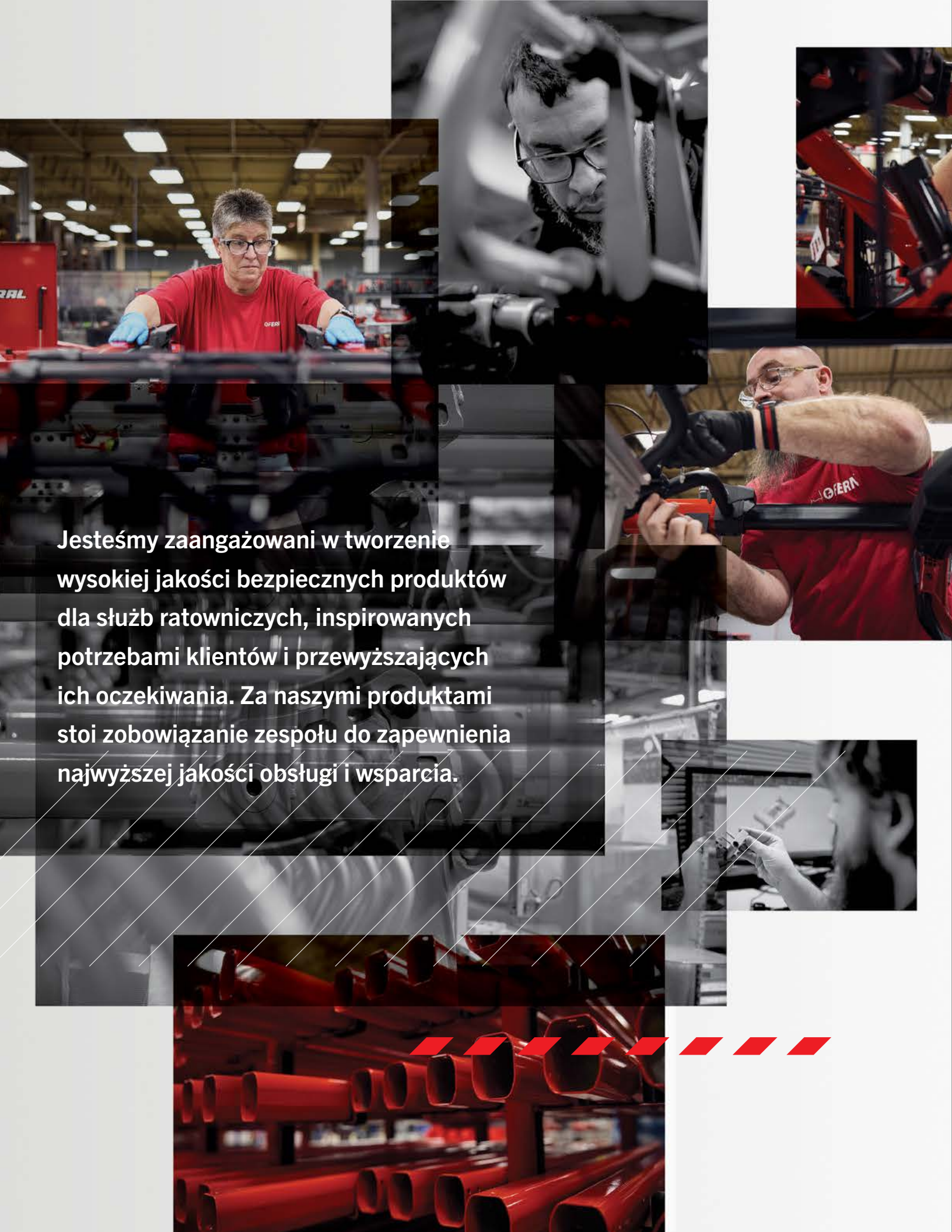

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie
wysokiej jakości bezpiecznych produktów
dla służb ratowniczych, inspirowanych
potrzebami klientów i przewyższających
ich oczekiwania. Za naszymi produktami
stoi zobowiązanie zespołu do zapewnienia
najwyższej jakości obsługi i wsparcia.



*„Naszym celem jest
zmieniać branżę. Wywierać
wpływ w sektorze
ratownictwa medycznego.
Ułatwiać pracę ratownikom,
zmniejszać ryzyko
urazów i wydłużać ich
karierę zawodową”.*

JONATHAN,
INŻYNIER PROJEKTU, FERNO



FERNO Group Inc.
70 Weil Way
Wilmington, OH
45177
FERNO.COM



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 47
tel. 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

PP-POWER_X2-260226