



Nosze Koszowe




Nosze

Titan

Seria noszy ratowniczych serii **Titan (Titan Rescue Litter Series)** to całkowicie nowe podejście do klasycznych noszy wojskowych typu Stokes. Górna szyna ma średnicę 2,5 cm, dzięki czemu nosze są łatwiejsze w obsłudze podczas długotrwałego transportu. Dostępne w wersji **jednoczęściowej** lub **dwuczęściowej**, o **regularnym** lub **zwężanym** kształcie. Nosze tytanowe **Titan**, zapewniające najlepszy stosunek wytrzymałości do masy, wyznaczają nowy standard w dziedzinie noszy ratowniczych. Odkryj wszystkie dostępne wersje tych fantastycznych noszy.



Opatentowane punkty mocowania **StratLoad™** zapewniające bezpieczne wpinanie pasów do podnoszenia.

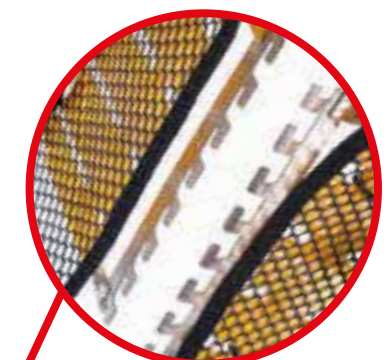


Łatwy i szybki montaż w wersji dwuczęściowej.

Dostępne w różnych wersjach:
Stal nierdzewna i tytan.


Wersja tytanowa jest najlżejsza na rynku, **waży zaledwie 8 kg.**



Szeroki wybór dostępnych akcesoriów, patrz strony 10-11

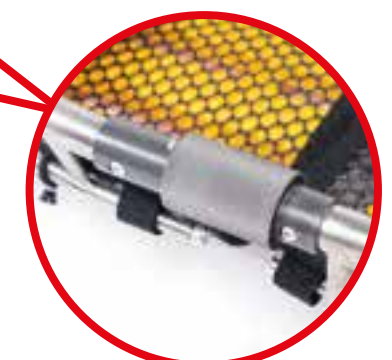

Funkcja **rozłączania** za pomocą systemu **LocSafe™** (tylko w wersjach dwuczęściowych) zapewnia niezawodne spinanie i umożliwia złożenie noszy w około 15 sekund.

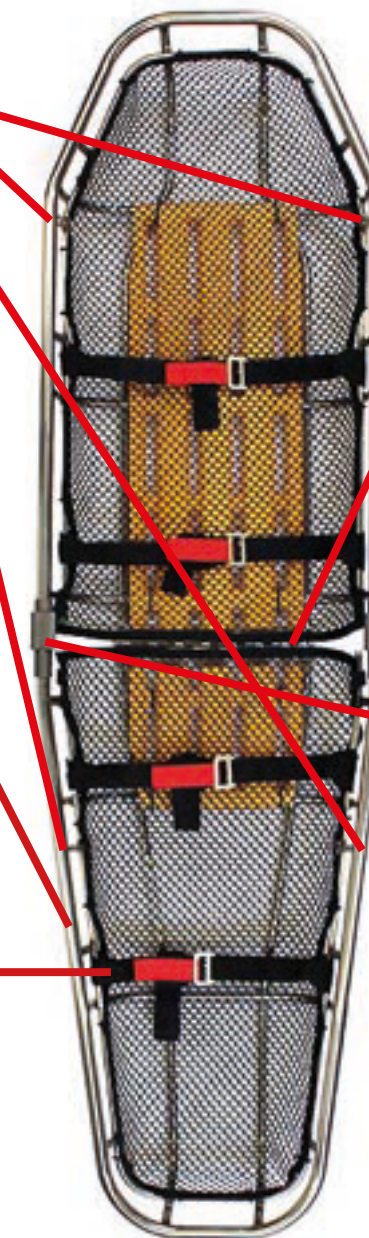


Nosze serii Titan

STAL
NIERDZEWNA

Seria Titan składa się z noszy ratowniczych wykonanych w całości ze **stali nierdzewnej**, wyposażonych w ramę spawaną metodą TIG. Ich wytrzymałość zapewnia geometria ramy, metody konstrukcyjne i użyte materiały. Nosze są dostępne w różnych **kształtach: regularne lub zwężane**, a także w wersji **dwuczęściowej lub jednoczęściowej**.

Cechy produktu

- Zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania podczas akcji ratowniczych. Materiały odporne na ekstremalne warunki.
- Cztery style: wersja **regularna** (Regular) pasuje do każdej deski ortopedycznej, wersja **zwężana** (Tapered) ułatwia dostęp do ciasnych przestrzeni, a 2-elementowe wersje **dwuczęściowe** (Split) ułatwiają transport i przechowywanie.
- Konstrukcja ramy spawana metodą TIG zarówno w wersji ze stali nierdzewnej, jak i tytanowej.
- Punkty mocowania **StratLoad™** umożliwiają szybkie i bezpieczne wpinanie oraz chronią karabinki przed ścianą i powierzchnią skalną.
- Potrójna funkcja bezpieczeństwa **LocSafe™** zapewnia bezpieczeństwo połączeń podczas każdej operacji.
- Wytrzymała i odporna na rdzę siatka z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) jest przymocowana za pomocą linki amortyzującej.
- Podparcie pleców z tworzywa UHMW-PE jest niezwykle wytrzymałe i nie pęka.
- Szeroki wybór dostępnych akcesoriów.
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i wydajności określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

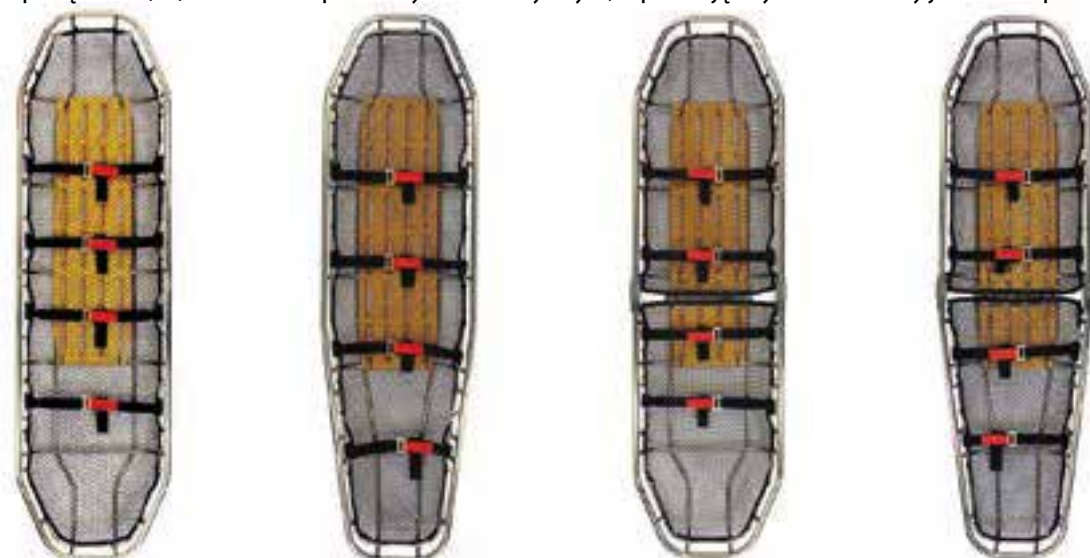

Titan Regular SS

Titan Tapered SS

Titan Split Regular SS

Titan Split Tapered SS

nr NATO 6530150119062

nr NATO 6530150119063

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Długość (dziel.)	Głębokość	Głębokość (dziel.)	Waga	Obciążenie
11-0101A	RE11019999	Titan regularne SS	59,4 cm	212 cm	--	18 cm	--	14 kg	1136 kg
11-0100A	RE11009999	Titan zwężane SS	59,4 cm	212 cm	--	18 cm	--	14 kg	1136 kg
11-0103A	0107975	Titan regularne dwuczęściowe SS	61,6 cm	212 cm	116 cm	19 cm	25 cm	15 kg	1136 kg
11-0104A	RE11049999	Titan zwężane dwuczęściowe SS	61,6 cm	212 cm	116 cm	19 cm	25 cm	15 kg	1136 kg

Seria Titan-Ti


TYTAN

Nosze ratownicze serii Titan-Ti zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w warunkach ratownictwa technicznego. Materiały, z których są wykonane, pozwalają im przetrwać w niemal każdych warunkach, a sama konstrukcja zapewnia użytkownikom wygodną platformę do pracy. Materiały tytanowe mają dodatkową zaletę w postaci znacznie mniejszej wagi w porównaniu z podobnymi modelami ze stali nierdzewnej.

Nosze są dostępne w różnych **kształtach: regularne lub zwężane**, a także w wersji **dwuczęściowej lub jednoczęściowej**.

Cechy produktu

- Konstrukcja dzielona zapewniająca łatwiejsze przechowywanie.
- Funkcje **LocSafe™** i **StratLoad™** w standardzie.
- **Regularna** konstrukcja pasuje do każdej deski, zwężana ułatwia dostęp do ograniczonych przestrzeni.
- Górna rura o średnicy 25,4 mm - duża górna rura zapewnia wygodny uchwyt, zwłaszcza podczas długiego transportu.
- Wytrzymała i odporna na rdzę siatka z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) jest przymocowana za pomocą linki amortyzującej.
- Podparcie pleców z UHMW-PE - koniec z drzazgami z drewnianego podparcia, a dodatkowo jest ono niezwykle wytrzymałe.
- Tytan zapewnia produktowi zarówno wytrzymałość, jak i lekkość, dzięki czemu model Titan-Ti to najlżejsze nosze na rynku.
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i działania określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

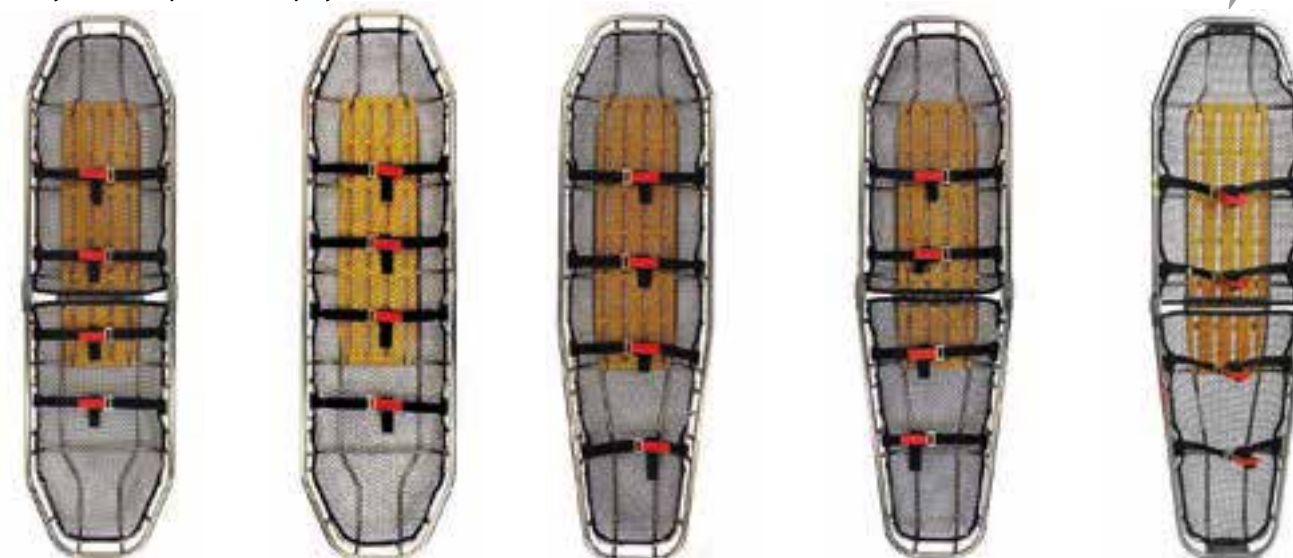Titan-Ti
Regular Split-Apart

Titan-Ti REGULAR

Titan-Ti Tapered

Titan-Ti Tapered Split-Apart

Titan-Ti for Tirol Kit

nr NATO 6530150119060

nr NATO 6530150119061

nr NATO 3920150208387

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Długość (dziel.)	Głębokość	Głębokość (dziel.)	Waga	Obciążenie
11-0115SL	-	Titan-Ti regularne dwuczęściowe	60,3 cm	212,1 cm	116 cm	19,4 cm	25 cm	9 kg	1136 kg
11-0116SL	-	Titan-Ti regularne	60,3 cm	212,1 cm	--	18,7 cm	--	8 kg	1136 kg
11-0118SL	-	Titan-Ti zwężane	59,1 cm	212,1 cm	--	18,7 cm	--	8 kg	1136 kg
11-0119SL	-	Titan-Ti zwężane dwuczęściowe	60,3 cm	212,1 cm	116 cm	19,4 cm	25 cm	9 kg	1136 kg
11-0119TIROL	-	Titan-Ti do zestawu Tirol	60,3 cm	212,1 cm	116 cm	19,4 cm	25 cm	9 kg	1136 kg

ZE
SPAWANYMI
PŁYTAMI

Titan 32


STAL
NIERDZEWNA

Nosze ratownicze Titan32 Rescue Litter posiadają wszystkie główne cechy noszy ze stali nierdzewnej serii Titan, ale zostały zaprojektowane specjalnie do transportu większych pacjentów. Dzięki szerokości 81,28 cm zapewniają dodatkową przestrzeń w szczególnych przypadkach, gdy rozmiar pacjenta wymaga innego podejścia do transportu.

Podobnie jak inne modele Titan, Titan32 ma dopuszczalne obciążenie 1134 kg i jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Cechy produktu

- Szerokość 81,28 cm
- Opatentowane punkty mocowania **StratLoad™**
- **Aluminiowe** płyty oparcia pleców
- Górna rura 2,54 cm
- Konstrukcja w całości spawana metodą TIG
- Przewyższa limit testów wojskowych 1134 kg
- Siatka z polietylenu o wysokiej gęstości
- Cztery pasy ratownicze pacjenta
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i działania określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

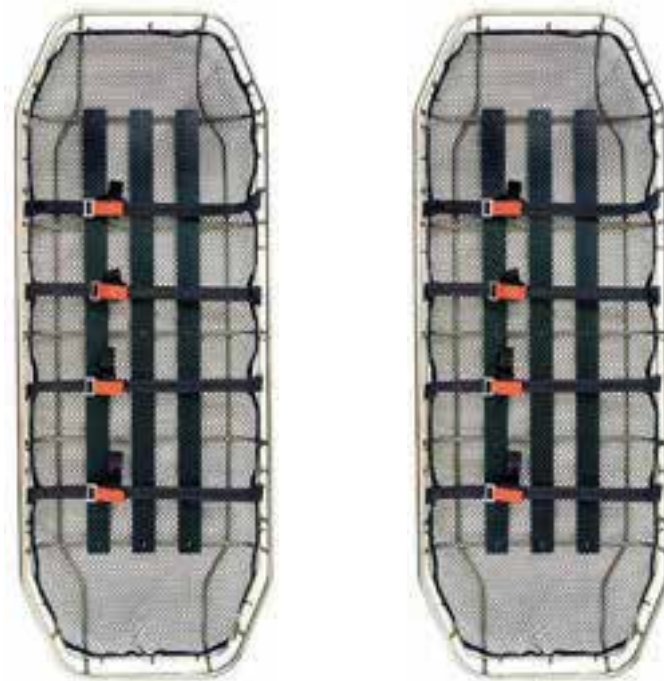

Poszerzane nosze
Titan 32 SS Wide

Nosze Titan 32 SS z mocowaniami
StratLoad™ i pasami 304,8 cm

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Głębokość	Waga	Obciążenie
11-0102A	RE11029999	Poszerzane nosze Titan 32 SS Wide	81 cm	212 cm	18 cm	19 kg	1136 kg
11-0102L	-	Nosze Titan 32 SS z mocowaniami StratLoad™ i pasami 304,8 cm	81 cm	212 cm	18 cm	19 kg	1136 kg



Model 71 & Model 71-S

Wykonane jako **skorupa z polietylenu o wysokiej gęstości** na trwale przymocowanej, wytrzymałej ramie aluminiowej. Formowane wsporniki i uchwyty ułatwiają obsługę, a mosiężne przelotki są rozmieszczone w strategicznych miejscach, aby umożliwić szybkie podłączenie do regulowanego zawiesia model 418-1.

Cechy produktu

- Konstrukcja wykonana ze **skorupy z polietylenu o wysokiej gęstości**, podpartej na trwale zamocowanej, wytrzymałej ramie aluminiowej.
- Formowane rury i uchwyty ułatwiają przenoszenie w trudnym terenie. Strategicznie rozmieszczone mosiężne przelotki umożliwiające szybkie użycie z zawieszem **418-1 Lifting Bridle**.
- Mata dla pacjenta z pianki o zamkniętych komórkach jest niechłonna i odporna nawet na najsilniejsze środki czyszczące.
- Matę pacjenta można zdjąć, co ułatwia czyszczenie lub wymianę.
- **Odporne** na chemikalia, promieniowanie UV, rdzę i korozję.
- Uwzględniają cztery dwuczęściowe 5-calowe pasy pacjenta z szybkim zwalnianiem.
- Dostępne zawiesie do podnoszenia i pokrowiec do modelu 71.
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i wydajności określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.




Model 71



Model 71-S

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Długość (dziel.)	Głębokość	Głębokość (dziel.)	Waga	Obciążenie
0107100	-	Model 71	61 cm	218 cm	---	19 cm	---	10 kg	272 kg
0107101	-	Model 71-S	61 cm	218 cm	117 cm	19 cm	26 cm	11 kg	272 kg

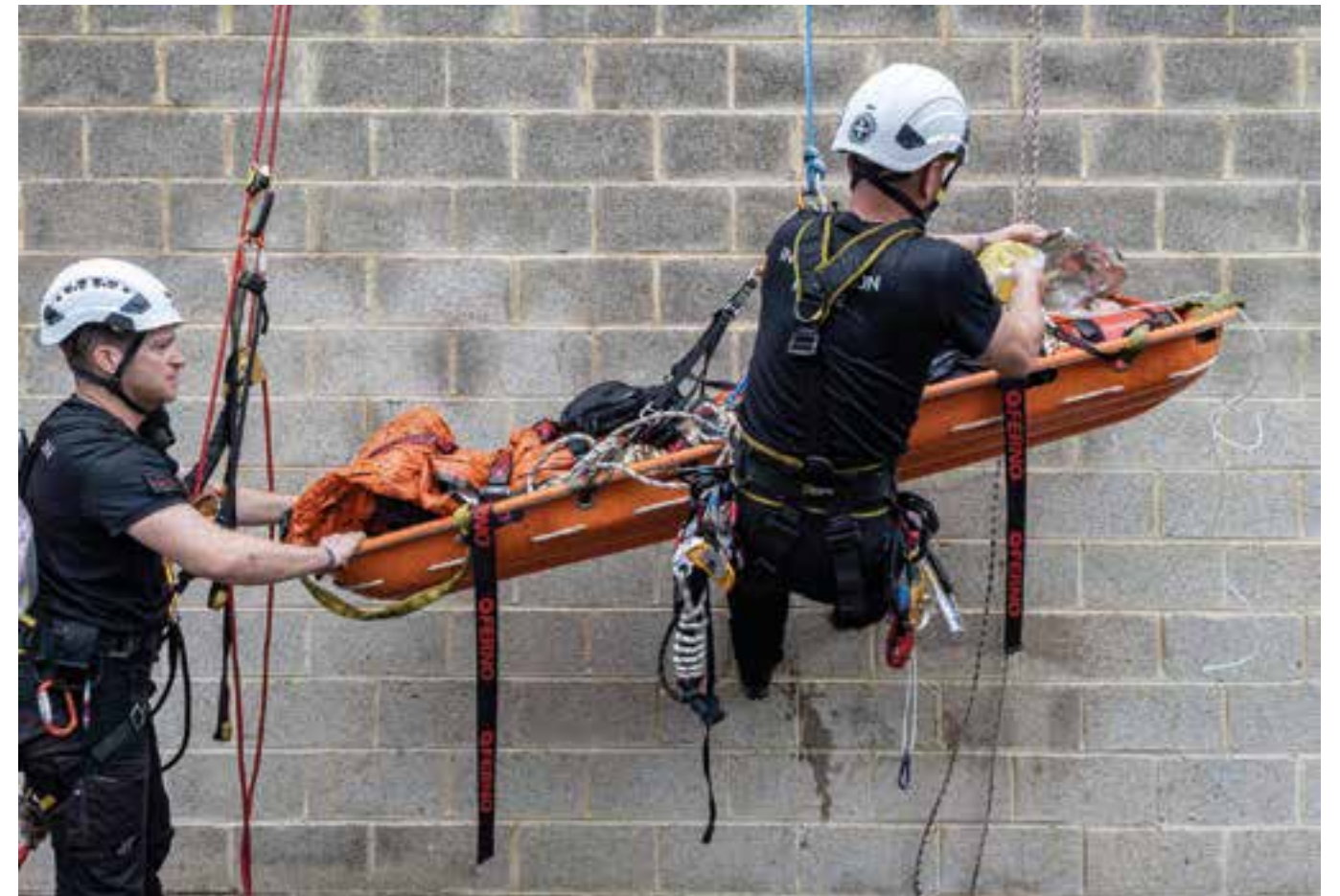

Akcesoria do modeli 71 i 71-S

418-1 Regulowane zawiesie do podnoszenia - pomarańczowa torba



DLA WERSJI:
Model 71

Nr MFR 0312390
Nr części (USA) 0312390

387-a Pokrowiec do noszy 71 i 71-M, pomarańczowy



DLA WERSJI:
Model 71

Nr MFR 0311800
Nr części (USA) 0311800

387-b Pokrowiec do noszy 71-S, pomarańczowy



DLA WERSJI:
Model 71

Nr MFR 0311820
Nr części (USA) 0311820

471 Kołnierz wypornościowy



5-sekcyjny, współpracuje z modelem 71, serią Gazelle i noszami koszowymi Advantage)

Nr części (USA): 0313943
Nr NATO 2090150119065



Akcesoria do noszy koszowych

471 Kołnierz wypornościowy



nr NATO 2090150119065

DLA WERSJI:

Model 71, seria Gazelle, Advantage

Nr MFR 0313943

Nr części (USA): 0313943

Zawiesie z miękkimi przelotkami



DLA WERSJI:

Titan, Pinnacle, Advantage, Spartan, TRS

Nr MFR 15-0106

Nr części (USA) 15-0106

Pokrowiec na koszowe nosze dwuczęściowe, żółty



DLA WERSJI:

wszystkie wersje noszy dwuczęściowych Traverse

Nr MFR 05-0145

Nr części (USA) 0374909

Pokrowiec na nosze koszowe z zamkiem błyskawicznym i uchwytami, czarny/pomarańczowy



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych (z wyjątkiem noszy TRS).

Nr MFR 15-0131

Nr części (USA) 0374911

Uprząż naramienna do noszy koszowych dwuczęściowych



DLA WERSJI:

wszystkie wersje Titan, nosze dwuczęściowe Traverse

Nr MFR 15-0150

Nr części (USA) 0374920

Poduszka ratunkowa z kocem polarowym



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych (z wyjątkiem noszy TRS).

Nr MFR EB700YP

Nr części (USA) 0374912

Zawiesie z twardymi przelotkami



DLA WERSJI:

Titan, Pinnacle, Advantage, Spartan, TRS

Nr MFR 15-0105

Nr części (USA) 15-0105

Pokrowiec na nosze koszowe, żółty



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych (z wyjątkiem noszy: 32" i TRS)

Nr MFR 05-0144

Nr części (USA) 0822069

Pokrowiec na nosze koszowe, niebieski



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych (z wyjątkiem noszy TRS).

Nr MFR 15-0130

Nr części (USA) 0374910

Uprząż naramienna do noszy koszowych Sherpa



DLA WERSJI:

nosze koszowe serii Gazelle i Titan, w tym Titan 32"

Nr MFR 15-0145

Nr części (USA) 0374919

Uchwyt do noszy koszowych



DLA WERSJI:

nosze serii Titan i Gazelle, zwężane

Nr MFR 15-0240

Nr części (USA) 0374921

Koc polarowy, niebieski



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych Traverse

Nr MFR EB500B

Pas przemysłowy do modelu Titan z klamrą Cobra



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych, z wyjątkiem modelu Toboga 32".

Nr MFR 10-00493

(C775) Karabinek stalowy KwikLock, CE, szt.



DLA WERSJI:

Titan, Pinnacle, Advantage, Spartan, TRS

Nr MFR 30-C775

Nr części (USA) 0832288

Plecak na nosze dwuczęściowe, piaskowy



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych

Nr MFR 05-0146-TAN

Pasy Traverse 58"



Pasy Traverse 147,32 cm (4 szt.)

Nr MFR 04-0108-TR4

Nr części (USA) 0374915

Kołnierz wypornościowy



DLA WERSJI:

nosze koszowe serii Gazelle i Titan, w tym Titan 32", Advantage, Spartan, Pinnacle

Nr MFR 11-0124A

Nr części (USA) 11-0124A

Pomarańczowy żagiel zapobiegający obracaniu się noszy koszowych



DLA WERSJI:

wszystkie nosze Ferno Toboga

Nr MFR EARS

Karabinek stalowy D 12 mm z offsetem, szt.



DLA WERSJI:

Titan, Pinnacle, Advantage, Spartan, TRS

Nr MFR 30-C015

Nr części (USA) 0822420

Plecak na nosze dwuczęściowe, niebieski



Do stosowania ze wszystkimi modelami noszy koszowych

Nr MFR 05-0146-BLUE


Uniwersalny zestaw montażowy do noszy



Nr MFR 11-1014

Nr części (USA) 111014U

Pasy Traverse 120"

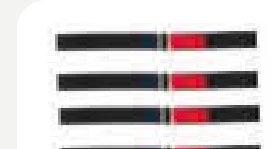

Pasy Traverse 304,8 cm (4 szt.)

Nr MFR 04-0108-120TR4

Nr części (USA) 0374914

Uprząż pacjenta do noszy koszowych



DLA WERSJI:

wszystkie nosze koszowe Traverse

Nr MFR BRH-BPH

Nr części (USA) BRHBPH

Pokrowiec Titan dla ratownictwa przemysłowego



Nowy system zabezpieczający nosze przeznaczony do ratownictwa przemysłowego. Maksymalne bezpieczeństwo, wyjątkowa wytrzymałość. Możliwość do stosowania do indywidualnych potrzeb.

Nr MFR 21-00062





Wózki do noszy

Modułowy zestaw akcesoriów Tirol Kit

POZYCJA STOŁU


Uchwyty można ustawić tak, aby pełniły funkcję nóg ramy, zapewniając stabilną pozycję noszy i umożliwiając udzielenie pomocy poszkodowanemu, który jest **uniesiony nad ziemią**.

UPRZAŻ NARAMIENNA

Pasy naramienne, które można łatwo dopasować, regulować i które są wyposażone w system wysokiej widoczności, umożliwiając bardziej efektywne rozłożenie przenoszonego ciężaru.

POWLEKANIE NIPLOY

Obróbka części metalowych preparatem Niploy w celu zapewnienia odporności na zużycie i ścieranie, gwarantująca długą trwałość.

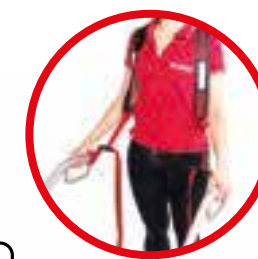

UCHWYTY
Regulacja w 12 pozycjach.



NISKA WAGA

Całkowita waga zestawu wynosi 10,8 kg, co pozwala na rozłożenie ciężaru między kilku operatorów. Zestaw można nosić w plecaku, zajmując minimalną ilość miejsca.

MONTAŻ Z PACJENTEM

Cały zestaw może zostać złożony w ciągu kilku sekund przez **jednego operatora**, a koło transportowe **można zamontować, gdy poszkodowany znajduje się już w odpowiedniej pozycji**.

WYBÓR KOŁA

System **jednokołowy** składający się ze składanego wspornika w kształcie litery „V” i szybkiej blokady zatraskowej. Można go skonfigurować z trzema różnymi typami kół.

CERTYFIKACJE

- EN ISO 13485:2016 + A11:2021 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych (ISO 13485:2016).
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i działania określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

Zestaw Tirol Kit

Do wyboru są **trzy różne wersje** zestawu **Tirol Kit**, każda z innym **kołem**.

Jeśli nie masz modelu **Titan-Ti ze spawaną płytą (kod 11-0119TIROL)**, nie ma problemu! Możesz kupić adapter i nadal korzystać z zestawu **Tirol Kit** z noszami.

Sprawdź na **następnej stronie kody adapterów**, które są potrzebne w zależności od **posiadanych noszy**.

Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i działania określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

Zestaw Tirol „Slim”

nr NATO 4220150208384

Nr MFR 21-0120-023

Nr części (USA) 0832287



Koło „Slim”

PAS RAMIENNY



TORBA TIROL KIT

Tirol Kit Xtreme

Nr MFR 21-00056

Nr części (USA) 0832292



Koło „Slim”

PAS RAMIENNY



TORBA TIROL KIT

Tirol Kit Xtreme Control

Nr MFR 21-00055

Nr części (USA) 0832293



Koło skretne Xtreme z hamulcem i lampą sygnalizacyjną

PAS RAMIENNY



TORBA TIROL KIT

Wybierz swój zestaw Tirol Kit

NOSZE,
KTÓRE
POTRZEBUJESZ ►

NOSZE,
KTÓRE MASZ

TITAN-Ti Z PŁYTAMI SPAWANYMI



Kod 11-0119TIROL

TITAN-Ti DWUCZĘŚCIOWE ZWĘŻANE



Kod 11-0119SL

TITAN-Ti ZWĘŻANE



Kod 11-0118SL

TITAN ZE STALI NIERDZ. ZWĘŻANE



Kod 11-0100A

TITAN-Ti REGULARN



Kod 11-0116SL

TITAN-Ti DWUCZĘŚCIOWE REGULARNE



Kod 11-0115SL

TITAN ZE STALI NIERDZ. REGULARNE



Kod 11-0101A


**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
**ZESTAW
TIROL KIT „SLIM”**
Kod 21-0120-023

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099

TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
TIROL KIT XTREME
Kod 21-00056

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099

**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00082
**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099
**TIROL KIT XTREME
CONTROL**
Kod 21-00055

**ADAPTER
ZESTAWU** 
Kod 25-00099



Dzięki **zestawowi zimowemu** nosze koszarowe mogą być również wykorzystywane podczas **zimowych akcji ratowniczych**. Dzięki dodaniu **przedłużeń uchwytów** i **skorup**, nosze można ciągnąć po śniegu i używać ich na **zaśnieżonych zboczach** oraz podczas **akcji ratowniczych poza trasami narciarskimi**.

Urządzenie przypominające płetwę umieszczone pod skorupą noszy zapewnia zestawowi zimowemu stabilność i łatwość obsługi na śniegu. Skorupy są wykonane z włókna szklanego z wewnętrzną warstwą z Kevlaru, co zwiększa ich odporność na ścieranie.

- Niska waga całkowita 11 kg.
- Kompatybilność z noszami zwężanymi i dwuczęściowymi, ze stali nierdzewnej i tytanu.
- **Odłączane uchwyty są składane, można je nosić w plecaku** i zdejmować w ciasnych przestrzeniach.
- Szybki i łatwy montaż.
- Materiał zapewnia **długotrwałą wytrzymałość**.
- Możliwość użycia **skorupy** w połączeniu z zestawem **Tirol Kit**, mocując **koło po akcji ratowniczej na śniegu**, aby dotrzeć do **karetki**.

Zestaw zimowy

Kod 21-0120-019

nr NATO 8145150208388



1 skorupa dla strony głowy

1 skorupa dla strony nóg



4 przedłużki uchwytów

1 rurka łącznika

CERTYFIKACJE

- Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)
- EN ISO 13485:2016 + A11:2021 i EN ISO 9001:2015 (SZJ)
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i wydajności określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.



Akcesoria do zestawu Tirol Kit

Pokrowiec ochronny Titan - 1 szt.



Jednoczęściowy pokrowiec z polietylenu do noszy Titan. Kompatybilny z modelami noszy zwężanych.

Nr MFR 21-0120-010

Pokrowiec ochronny Titan - 2-częściowy



Dwuczęściowy pokrowiec polietylenowy do noszy Titan. Kompatybilny z modelami noszy zwężanych.

Nr MFR 21-0120-010_1

System transportu na ramionach



Pas do przenoszenia noszy Titan i zestawu zimowego na ramionach. Kompatybilny z modelami noszy dwuczęściowych.

Nr MFR 10-2916-001
Nr części (USA) 0832296

Zestaw zimowy



Zestaw ratowniczy do akcji na stoku. Kompatybilny z modelami noszy zwężanych i dwuczęściowych ze stali nierdzewnej i tytanu.

Nr MFR 21-0120-019

Koło Xtreme



Koło XXL do zestawu Tirol.

Nr MFR 25-00158

Koło skrętne Xtreme



Koło XXL z hamulcem i światłem do zestawu Tirol.

Nr MFR 25-00132

Adapter - Titan-T regularne



Zestaw adapterów do noszy prostokątnych Titan REGULAR bez spawanych płyt.

Nr MFR 25-00099
Nr części (USA) 0832295

Adapter - Titan-T Tapered



Zestaw adapterów do noszy Titan zwężanych bez spawanych płyt.

Nr MFR 25-00082
Nr części (USA) 0832294

Pokrowiec kół zestawu Tirol



Błotnik i/lub obudowa zabezpieczająca do zestawu Tirol Kit.

Nr MFR 25-00155

Zestaw do opon



Zestaw naprawczy do kół zestawu Tirol.

Nr MFR KIT TIRE

Torba Tirol Kit Plus



Duża torba na zestaw Tirol Kit i nosze Titan. Kompatybilna z dwuczęściowymi noszami koszarowymi o zwężanym kształcie.

Nr MFR BAG TIROL KIT PLUS

TORBA DO PRZECHOWYWANIA KÓŁ XXL



Torba na koła Tirol Kit XXL.


Nr MFR 25-00156

Porter

Ten **dwukołowy system transportowy** z uchwytami w ośmiu pozycjach stanowi uniwersalne rozwiązanie transportowe, zapewniające większą siłę dźwigni i łatwiejsze przenoszenie, co zmniejsza zmęczenie i ryzyko urazów.

Cechy produktu

- Uniwersalna konstrukcja, **kompatybilna z każdym rodzajem i stylem noszy z grzbietem** (nawet prowizorycznymi noszami wykonanymi z drewnianych desek lub belek).
- Osiem pozycji **regulowanych uchwytów** i dwa koła odporne na przebicie, które nie ulegają przebiciu ani nie tracą powietrza podczas dłuższego transportu.
- **System szybkiego mocowania** z zapadką blokuje nosze za pomocą dwóch pasów i dwóch gumowanych stalowych haczyków/pasków, aby je przymocować.
- Dwa pasy mocujące (dwa haczyki na każdy pas) mają udźwig 4,5 kN (1000 funtów) i są wyposażone w mocne i trwałe urządzenie blokujące z zapadką, które jest łatwe w obsłudze w każdych warunkach pogodowych.
- Haczyki na pasach mocujących mają otwór o średnicy jednego cala i można je przymocować do każdego rodzaju noszy.
- Szybkozłączki po obu stronach uchwytu z łatwością blokują je w odpowiedniej pozycji (każda szybkozłączka jest wyposażona w linkę zabezpieczającą).
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i wydajności określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.

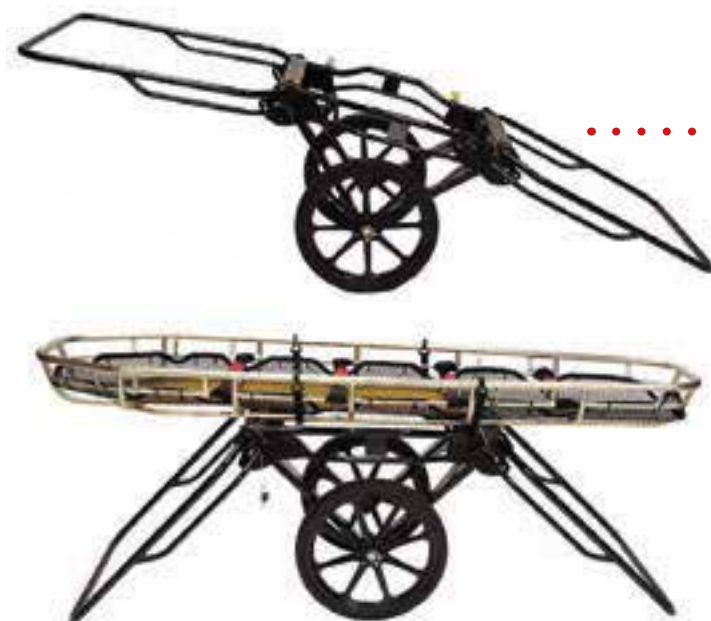

ŁATWE PRZECHOWYWANIE



Porter

Torba do przechowywania Traverse Mule/Porter, czarna

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Głębokość	Waga	Obciążenie
11-2224	-	System transportowy Porter	95 cm	100 cm	18,5 kg	50 cm	227 kg
11-2224-g	-	System transportowy Porter z dużymi haczykami w kształcie litery S -	-	-	-	-	-
11-2200	-	Torba do przechowywania Traverse Mule/Porter, czarna	-	-	-	-	-

Wózek kołowy Mule II

Wózek Mule II z kołem terenowym, szybkim i prostym systemem mocowania oraz uchwytami z ośmioma pozycjami stanowi uniwersalne rozwiązanie transportowe. Większa siła dźwigni i łatwiejsze przenoszenie zmniejszają zmęczenie i ryzyko kontuzji.

Cechy produktu

- **Uniwersalna konstrukcja**, kompatybilna z każdym typem i stylem sztywnych noszy
- 8 pozycji **regulacji uchwytów**
- Konstrukcja z jednym kołem jest idealna do wąskich szlaków, zapewnia zwinność, wszechstronność i łatwość poruszania się w najtrudniejszym terenie, w tym na bagnach, koleinach, korzeniach, skałach i śniegu.
- Duże, lekkie koło do pojazdów ATV („quad”) zapewnia lepszą stabilność toru jazdy i amortyzację wstrząsów, co przekłada się na płynny i komfortowy transport pacjentów.
- Szybki system mocowania zapadkowego blokuje nosze koszarowe za pomocą 2 pasów i 2 gumowanych stalowych haczyków/pasów.
- Nowe **szybkozłączki** po obu stronach uchwytu z łatwością blokują je w odpowiedniej pozycji; każda szybkozłączka posiada linkę zabezpieczającą.
- Unikalna konstrukcja z jednym wspornikiem umożliwia szybki i łatwy demontaż koła, co pozwala na kompaktowe przechowywanie i transport.
- Produkt posiada oznaczenie CE klasy I, zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa i działania określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zapewniając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów.



ŁATWE PRZECHOWYWANIE



Wózek kołowy Mule II

Torba do przechowywania Traverse Mule/Porter, czarna

Nr MFR	Nr części (USA)	Opis	Szerokość	Długość	Głębokość	Waga	Obciążenie
11-2220	112220	Wózek kołowy Mule II	243,84 cm	71 cm	20,9 kg	47 cm	227 kg
11-2200	-	Torba do przechowywania Traverse Mule/Porter, czarna	-	-	-	-	-

Autoryzowany dystrybutor i serwis:



Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa
tel.: 22 313 09 39
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl