




OPIS PRODUKTU:


Hill-Rom® HR900 Elite to elektrycznie sterowane łóżko wzmożonego nadzoru, należące do szerszej platformy HR900. Dzięki różnorodności konfiguracji oraz kompatybilności z całą gamą materacy producenta, dedykowane jest m.in. na oddziały pooperacyjne, kardiologiczne czy neurologiczne.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierki bocznej zaledwie 4 cm z każdej strony łóżka
- Automatyczny AutoContour™ – regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia powoduje automatyczne uruchomienie regulacji segmentu ud, które następuje z 5-sekundowym opóźnieniem
- Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site™ dostarcza informacji na temat kąta ułożenia pacjenta
- Pozycje Trendelenburga/anty-Trendelenburga – podstawowe terapie ułożeniowe
- Sterowanie za pomocą paneli w barierkach bocznych – łatwa i intuicyjna obsługa funkcji elektrycznych łóżka. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne
- Blokada wszystkich czterech kółek (hamulec centralny) zwiększa bezpieczeństwo pacjenta
- Pozycja krzesła EasyChair™ – możliwość prowadzenia terapii pacjenta w pozycji siedzącej
- Funkcje AutoContour™, SlideGuard™ oraz autoregresja minimalizują zsuwanie się pacjenta w dół łóżka oraz poprawiają jego komfort podczas unoszenia segmentu oparcia
- W przypadku konieczności wykonania czynności reanimacyjnych, personel medyczny może reagować szybciej dzięki funkcji AutoCPR
- Wydzielony przycisk wyjścia ustawia łóżko w pozycji wygodnej do opuszczenia łóżka przez pacjenta

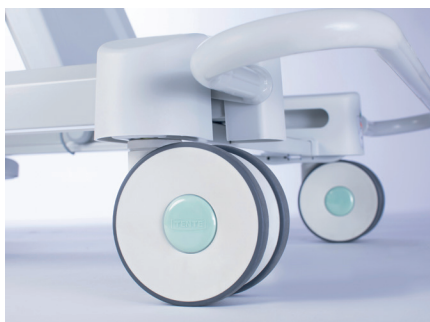

Opcjonalne podwójne koła

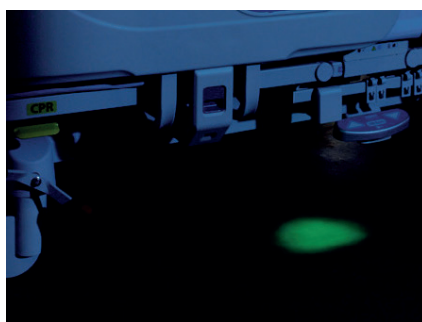

Opcjonalne inteligentne podświetlenie nocne



Wskaźnik najniższej wysokości i wydzielony przycisk pozycji wyjściowej



Zintegrowane sterowanie oraz uchwyty wyjściowe



Opcjonalnie dwustronna nożna dźwignia regulacji wysokości z automatyczną blokadą funkcji



Opcjonalny 3-stopniowy alarm wyjścia z łóżka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Bezpieczne obciążenie robocze 220 kg (opcjonalnie zwiększenie do 250 kg)
- Masa łóżka 144 kg
- Regulacja wysokości od 38,9 do 76,8 cm
- Klasa wodoszczelności IPX4
- Regulacja nachylenia łóżka
 - Segment oparcia od 0 do 65°
 - Segment ud od 0 do 28°
 - Segment podudzia od -3° do -22°
- Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga od -17 do +17°
- Szerokość leża 90 cm
- Długość leża 200 cm
- Powierzchnia leża: Laminat wysokociśnieniowy (HPL)
- Wysokość barierki bocznej 39,3 cm
- Kółka 15 cm, pojedyncze (opcjonalnie: 15 cm podwójne, 12,5 cm pojedyncze lub podwójne)
- Kółko sterujące pod segmentem oparcia (opcjonalnie od strony stóp)
- Opcjonalnie piąte koło sterujące
- Hamulec centralny
- Sterowanie zintegrowane w barierkach bocznych (opcjonalnie przewodowy pilot sterujący lub pilot na elastycznym ramieniu lub/i dwustronny pedał nożny do regulacji wysokości)
- Opcjonalnie alarm niezaciągniętego hamulca
- Dwustronna mechaniczna dźwignia CPR
- Opcjonalnie nieruchomy szczyt górny
- Wskaźnik najniższej pozycji łóżka
- Funkcja EasyChair i funkcja poziomowania leża
- Opcjonalnie inteligentne podświetlenie nocne
- Opcjonalna dostępna z jednego przycisku pozycja szokowa (w kombinacji z wybranymi opcjami)
- Opcje dodatkowe: przedłużenie leża i półka na pościel
- Uchwyty na statywy na kroplówkę w 4 rogach
- 8 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta
- Gniazda na wąż ręki i statywy infuzyjne
- Obustronne listwy z haczykami
- Uchwyt na przewód zasilający
- Klamry przytrzymujące materac
- Akumulator
- Wyjmowane szczyty łóżka
- Wskaźniki nachylenia segmentu oparcia i pozycji Trendelenburga
- Pozycja wyjściowa dostępna z jednego przycisku
- Możliwość czyszczenia parowego
- Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

MODEL		
HR900-ELITE		
CZĘŚCI ZAMIENNE	TEX034	Pokrowiec na dwugęstościowy materac ze zgrzewanym pokrowcem (do NP150C) Rozmiar: 198 x 90 x 14 cm / Size 16
	ASS034	Wiskoelastyczny materac ze zgrzewanym pokrowcem Rozmiar: 198 x 90 x 14 cm / Size 16; (NP150-WD)
AKCESORIA I OPCJE	AC959A	Uchwyty na butlę tlenową
	AD810A	Wysięgnik dla Pacjenta (stały)
	AD811A	Wysięgnik dla Pacjenta (ruchomy) jasnoszary
	AD294A	Statyw infuzyjny 4 haki bez regulacji wysokości
	AD298A	Regulowany kwadratowy statyw infuzyjny 4 haki
	AD299A	Regulowany okrągły statyw infuzyjny 4 haki
	AD242A	Segment oparcia przezierny dla RTG z kieszenia/szufladą na kasety
	AD288A	Uzupełnienie barierki/barierka na całej długości leża (tylko dla łóżek z dzielonymi barierkami bocznymi)

Okres gwarancji: 2 lata

KORZYŚCI:

- Automatyczny AutoContour™ – regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia powoduje automatyczne uruchomienie regulacji segmentu ud, które następuje z 5-sekundowym opóźnieniem
- Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia Line-Of-Site™ dostarcza informacji na temat kąta ułożenia pacjenta
- Pozycje Trendelenburga/anty-Trendelenburga – podstawowe terapie ułożeniowe
- Sterowanie za pomocą panelu zintegrowanego z dzielonymi barierkami bocznymi – łatwa i intuicyjna obsługa funkcji elektrycznych łóżka
- Blokada wszystkich czterech kółek (hamulec centralny) zwiększa bezpieczeństwo pacjenta
- Pozycja krzesła EasyChair™ – ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej
- Funkcje AutoContour™, SlideGuard™ oraz autoregresja segmentu oparcia minimalizują zsuwanie się pacjenta w dół łóżka oraz poprawiają jego komfort podczas unoszenia segmentu oparcia
- Funkcja Alarmu Wyjścia z Łóżka informuje personel o próbach migracji lub opuszczenia łóżka przez pacjenta
- Stabilne podparcie – ergonomicznie umieszczone uchwyty ułatwiają wstawanie z łóżka



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

